

ЛАРИНГОСКОПЫ

HD Ларингоскоп	
Жёсткие ларингоскопы	ENR-105
	ENR-110

СИНУСОСКОПЫ

TrueView Direct	
Синусоскопы	ENR-202
	ENR-203

Схема Совместимости	
TrueView Direct	ENR-204

HD Синусоскопы	
4 мм	ENR-206

TrueView II	
2,7 мм Синусоскопы.....	ENR-207

Mini-TrueView	
1,9 мм Синусоскопы.....	ENR-210

Схема Совместимости	
HD Синусоскопы, TrueView II	
и Mini-TrueView	ENR-212

HD²


ВЫСОКОЕ РАЗРЕШЕНИЕ ВЫСОКАЯ НАДЁЖНОСТЬ



reddot design award
winner 2009




Design
Award
Winner
2009

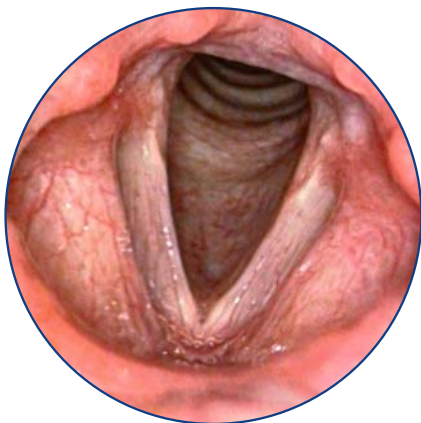

- ✓ Высокое разрешение
Высокое качество изображения – большое удобство
Ларингоскоп высокого разрешения оснащён уникальной оптической системой высокой разрешающей способности.
Контрастность и цветовоспроизведение – на высочайшем уровне технологии.
Благодаря большой глубине резкости, рефокусировка во время процедуры не требуется.



- ✓ Высокая надёжность
Новая конструкция – большая надёжность
Снижение затрат в течение срока эксплуатации: новая конструкция линзовой системы обеспечивает значительное увеличение надёжности.
Удары и сотрясения поглощаются новой системой защиты линз.
Снижается вероятность повреждения линз во время повседневной работы и обеззараживания.

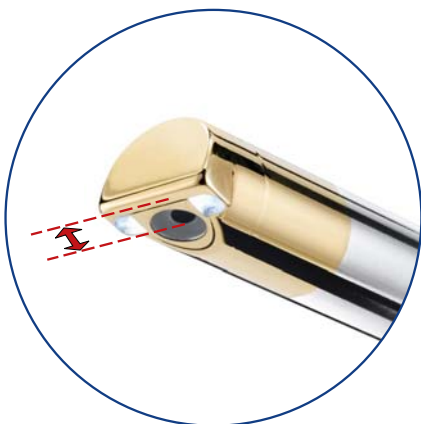

- ✓ Предусмотрено удобство для пациентов
Меньше выражен глоточный рефлекс: максимально уменьшено расстояние между оптикой и дистальным концом инструмента.



- ✓ Готовность к использованию
Ларингоскоп высокого разрешения совместим со всеми важными методами обеззараживания – автоклавированием, автоматизированной очисткой и дезинфекцией (обработкой глutarальдегидом и перуксусной кислотой).
Отсоединяемая рукоятка для обеспечения полного обеззараживания.



reddot design award
winner 2009



Design
Award
Winner
2009




- ✓ Высокое разрешение, высокая надёжность
- ✓ Не требуется рефокусировка, благодаря большой глубине резкости
- ✓ Предусмотрено удобство для пациента
- ✓ Отсоединяемая рукоятка для обеспечения полного обеззараживания
- ✓ Отличная совместимость с методами обеззараживания


HD Ларингоскоп

HD ларингоскопы оснащены отсоединяемой рукояткой.

WA96100A Телескоп, HD,
автоклавируемый,
10 мм,
рабочая длина 167 мм,
направление обзора 70°

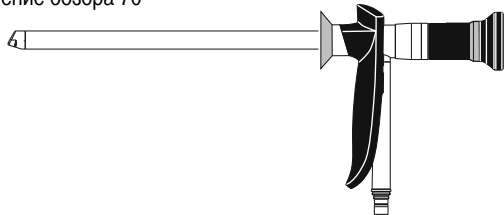


WA96105A Телескоп, HD,
автоклавируемый,
10 мм,
рабочая длина 167 мм,
направление обзора 90°

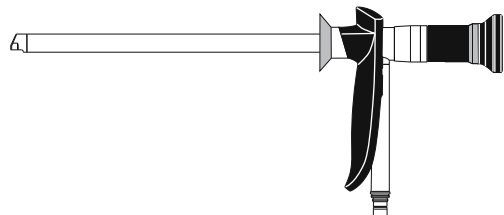

Комплектующие

WA03210A Световодный кабель,
размер M,
вилочный тип,
3 м,
тип CF

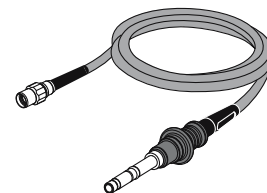


Подробности для световодных адаптеров
смотрите страницы ACC-150/-160.

WA91500A Источник света «EndoLED»,
для жёстких эндоскопов

Подробности смотрите страница EQ-370.



WA05970A Стерилизационная кассета,
с крышкой,
с силиконовой подушкой WA05980A,
наружные размеры 537 x 139 x 268 mm

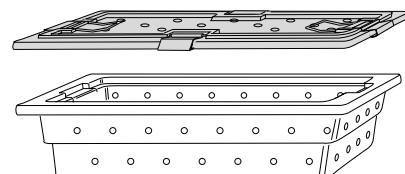

Подробности смотрите страница CDS-345.

СИСТЕМА ЦИФРОВОЙ ИНТЕГРАЛЬНОЙ КАМЕРЫ



reddot design award
winner 2005



VISERA



Максимальная эргономичность

Инструменты TrueView Direct обеспечивают максимальный комфорт при обращении. Вращение телескопа и манипулирование кнопками управления камерой может легко осуществляться одной рукой. Другая рука остаётся свободной для использования ручных инструментов и энергетических приборов.



Все элементы соединяются последовательно

Надёжный механизм TrueView Direct для быстрого соединения между телескопом и головкой камеры позволяет уменьшить число операций при сборке. Устранение внешнего световодного кабеля обеспечивает «прямой путь» световому потоку для освещения.



Индивидуальное управление камерой

Три свободно программируемые кнопки управления позволяют вам программировать часто используемые функции. Кроме того, индивидуальные установки параметров (баланс белого, увеличение, управление видеоманитомом и др.) могут быть сохранены и легко воспроизведены при следующей процедуре.




reddot design award
winner 2005




- ✓ Возможность управления одной рукой
- ✓ Все элементы соединяются последовательно
- ✓ Превосходные оптические характеристики

4 мм телескопы TrueView Direct


WA70000A Телескоп,
автоклавируемый,
направление обзора 0°,
поле зрения 115°,
рабочая длина 155 мм

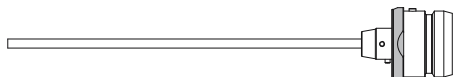

WA70005A Телескоп,
автоклавируемый,
направление обзора 30°,
поле зрения 115°,
рабочая длина 155 мм

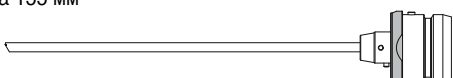


WA70010A Телескоп,
автоклавируемый,
направление обзора 70°,
поле зрения 115°,
рабочая длина 155 мм

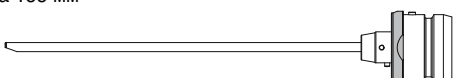

Видеосистема VISERA

Видеосистема «OTV-S7»


VISERA

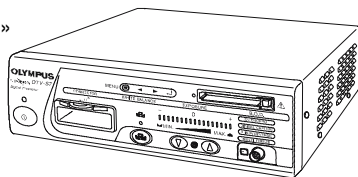

Подробности смотрите страницы EQ-115/-116/-117.

Головка камеры «OTV-S7H-VA»,
автоклавируемый,

N1771840 PAL
N1771830 NTSC

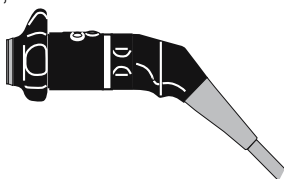

2,7 мм телескопы TrueView Direct


WA70015A Телескоп,
автоклавируемый,
направление обзора 0°,
широкоугольное поле зрения,
рабочая длина 155 мм



WA70020A Телескоп,
автоклавируемый,
направление обзора 30°,
широкоугольное поле зрения,
рабочая длина 155 мм



WA70025A Телескоп,
автоклавируемый,
направление обзора 70°,
широкоугольное поле зрения,
рабочая длина 155 мм

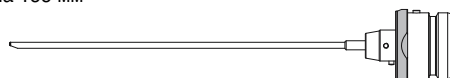


WA70021A Телескоп,
автоклавируемый,
направление обзора 30°,
широкоугольное поле зрения,
рабочая длина 106 мм



Комплектующие и запасные части


WA05954A Стерилизационная кассета

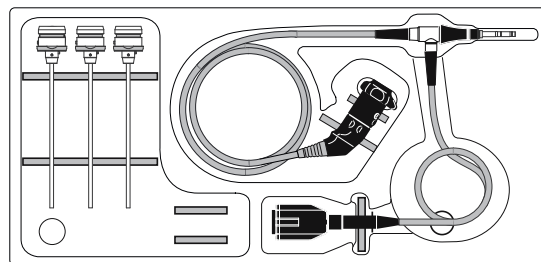

Подробности смотрите страница CDS-345.

Схема Совместимости

TrueView Direct

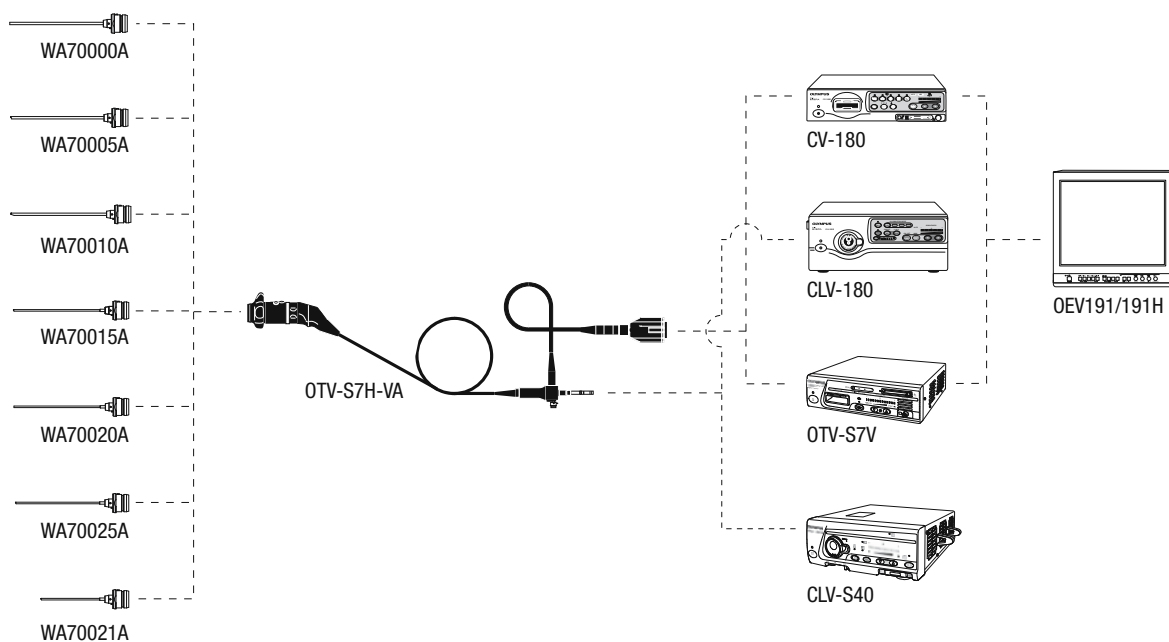




Объектив с точной цветопередачей в синусоскопах высокого разрешения диаметром 4 мм обеспечивает чёткий обзор и различение тонких структур на всём протяжении эндоскопического поля зрения. Сочетание с надёжной механической конструкцией обеспечивает синусоскопам высокого разрешения безупречность в эксплуатации.

- ✓ Выдающееся оптическое качество, благодаря отличному контрасту и гомогенному освещению
- ✓ Нет проблем с обеззараживанием:
 - Автоклавируемый
 - Совместим с глютаральдегидом и перуксусусной кислотой
 - Совместим с аппаратами для мойки/дезинфекции
- ✓ Полный ассортимент изделий: многообразные направления обзора, коннектор для световода в верхней и в нижней части




4 mm HD Синусоскопы


WA96200A Телескоп, HD, автоклавируемый,
4 мм, направление обзора 0°,
коннектор для световода в нижней

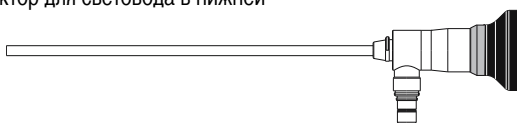


WA96201A Телескоп, HD, автоклавируемый,
4 мм, направление обзора 30°,
коннектор для световода в нижней

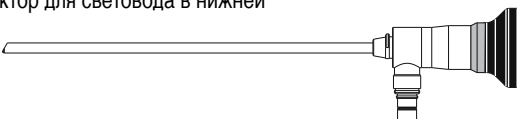


WA96202A Телескоп, HD, автоклавируемый,
4 мм, направление обзора 30°,
коннектор для световода в верхней

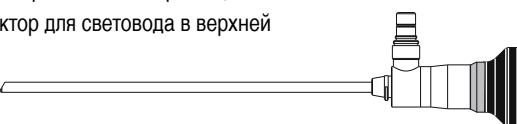


WA96203A Телескоп, HD, автоклавируемый,
4 мм, направление обзора 45°,
коннектор для световода в нижней

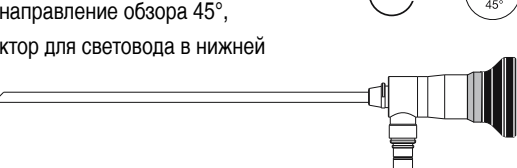


WA96204A Телескоп, HD, автоклавируемый,
4 мм, направление обзора 45°,
коннектор для световода в верхней

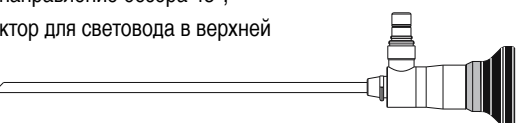

WA96205A Телескоп, HD, автоклавируемый,
4 мм, направление обзора 70°,
коннектор для световода в нижней

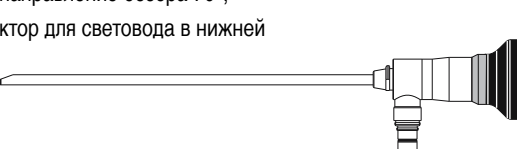

WA96206A Телескоп, HD, автоклавируемый,
4 мм, направление обзора 70°,
коннектор для световода в верхней

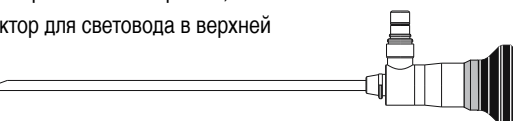

Комплектующие и запасные части

WA96208 Рукоятка,
для синусоскопа




WA91500A Источник света «EndoLED»,
для жёстких эндоскопов



Подробности смотрите страница EQ-370.

WA03200A Световодный кабель,
размер S,
вилочный тип,
3 м

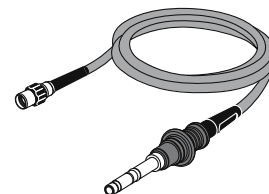


Подробности для световодных адаптеров
смотрите страницы ACC-100/-150.

A0460 Световодные адаптеры,
для световодных кабелей OES 4000
O0332 для световодных кабелей Wolf



Стерилизационная кассета

WA05990A Стерилизационная кассета,
для 2 телескопов

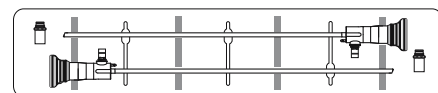

Подробности смотрите страница CDS-340.







Основа телескопов TrueView II диаметром 2,7 мм – превосходная система линз. Комбинация превосходных оптических характеристик и надёжной механической конструкции, обеспечивает телескопам Olympus безупречность в эксплуатации.

- ✓ Превосходные оптические качества
- ✓ Превосходная цветопередача
- ✓ Надёжная механическая конструкция



2,7 мм телескопы TrueView II

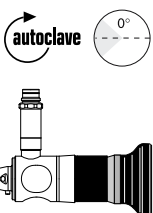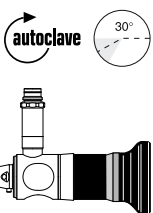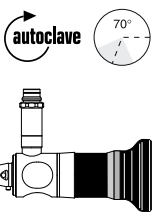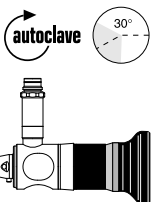A70960A	Телескоп, автоклавируемый, 2,7 мм, направление обзора 0°, рабочая длина 160 мм	
A70961A	Телескоп, автоклавируемый, 2,7 мм, направление обзора 30°, рабочая длина 160 мм	
A70962A	Телескоп, автоклавируемый, 2,7 мм, направление обзора 70°, рабочая длина 160 мм	
A70963A	Телескоп, автоклавируемый, 2,7 мм, направление обзора 30°, рабочая длина 70 мм	


Комплектующие и запасные части

WA91500A Источник света «EndoLED»,
для жёстких эндоскопов

Подробности смотрите страница EQ-370.




WA03200A Световодный кабель,
размер S,
вилочный тип,
3 м

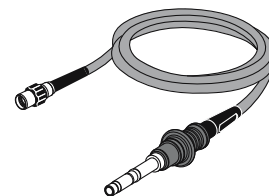

Подробности для световодных адаптеров
смотрите страницы ACC-100/-150.

A0460 Световодные адаптеры,
для световодных кабелей OES 4000
O0332 для световодных кабелей Wolf

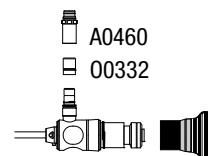


A5333 Раструб окуляра,
для телескопов

A5333

Стерилизационная кассета

WA05990A Стерилизационная кассета,
для 2 телескопов

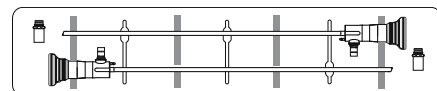

Подробности смотрите страница CDS-340.



На основе конструкции TrueView II разработаны телескопы нового поколения диаметром 1,9 мм для хирургии околоносовых пазух. Новый класс телескопов, благодаря передовой волоконно-оптической технологии фирмы Olympus, допускает полную стерилизацию в автоклаве и отличается длительными сроками службы. Для врача новый класс телескопов означает получение ярких насыщенных изображений, блестящее воспроизведение цветов, высокая разрешающая способность и эргономичная конструкция.



Высокая надёжность




Волоконно-оптическая технология




1,9 мм телескопы TrueView


A7504A Телескоп,
автоклавируемый,
1,9 мм, направление обзора 0°,
рабочая длина 65 мм

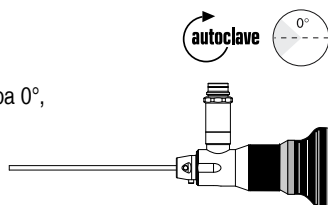


A7505A Телескоп,
автоклавируемый,
1,9 мм, направление обзора 30°,
рабочая длина 65 мм

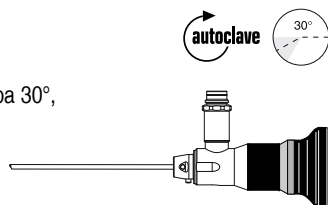

A7506A Телескоп,
автоклавируемый,
1,9 мм, направление обзора 0°,
рабочая длина 115 мм

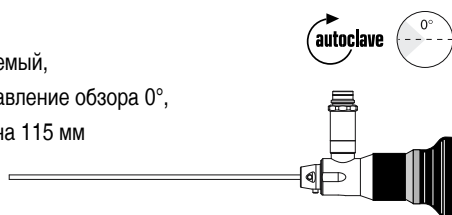

A7507A Телескоп,
автоклавируемый,
1,9 мм, направление обзора 30°,
рабочая длина 115 мм

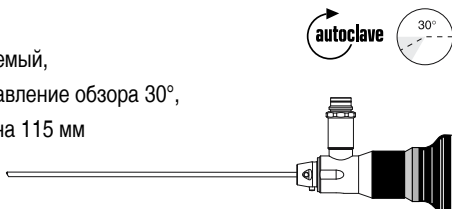


Комплекующие и запасные части

WA91500A Источник света «EndoLED»,
для жёстких эндоскопов

Подробности смотрите страница EQ-370.



WA03200A Световодный кабель,
размер S,
вилочный тип,
3 м

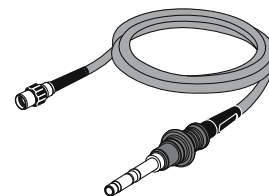


Подробности для световодных адаптеров
смотрите страницы ACC-100/-150.

A0460 Световодные адаптеры,
для световодных кабелей OES 4000
O0332 для световодных кабелей Wolf

A0460
O0332


A5333 Раструб окуляра,
для телескопов

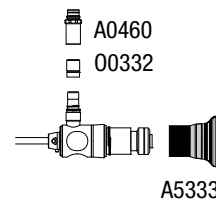

A5333

Стерилизационная кассета

WA05990A Стерилизационная кассета,
для 2 телескопов

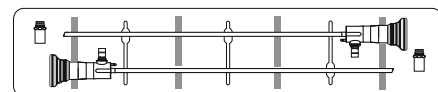

Подробности смотрите страница CDS-340.

Схема Совместимости

HD Синусоскопы, TrueView II и Mini-TrueView

